


## ドライバの更新手順

1. 新しいバージョンのドライバパッケージの入ったフォルダをデスクトップ上に置きます。(CD-ROM 上から PC のローカルドライブ、例えばデスクトップ上にコピーしてください)
2. カメラを PC に接続し、デバイスマネージャを開きます。
3. 下記画面のように、イメージングデバイスに認識されているカメラで右クリックし、『ドライバソフトウェアの更新』を選択します。

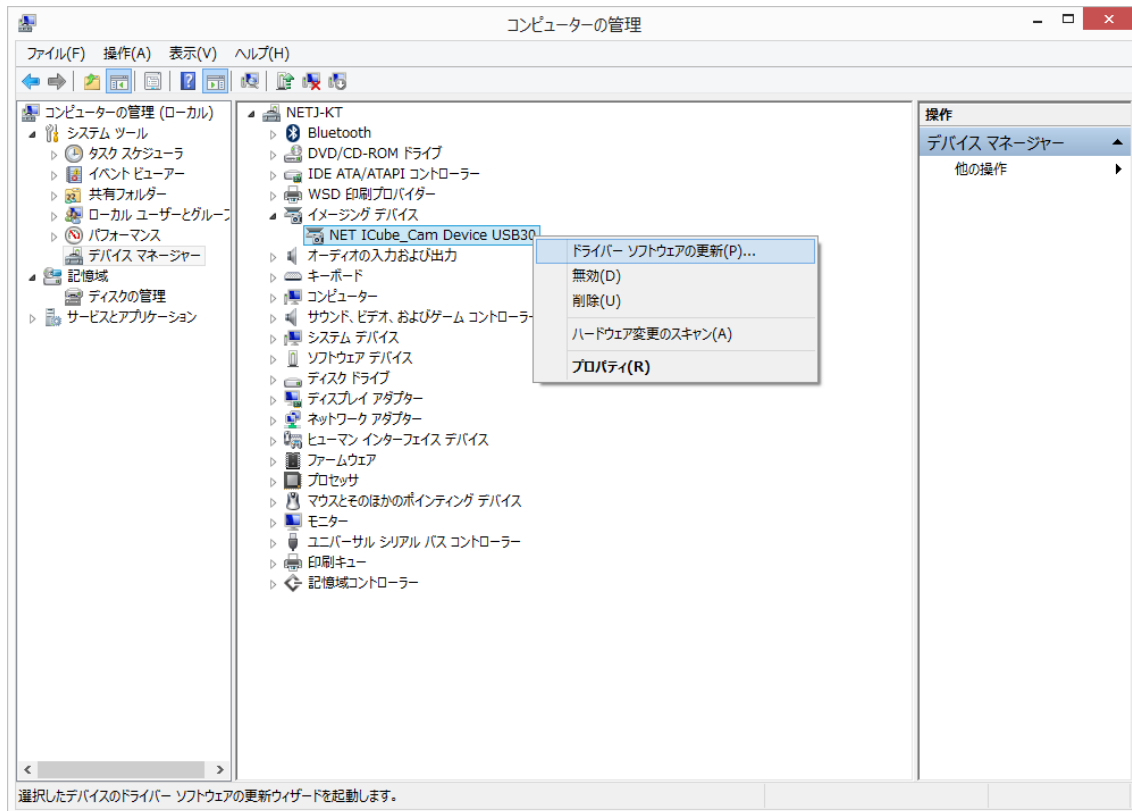

※デバイスマネージャにて、イメージングデバイス以外で接続されているカメラが認識されている場合、例えば『△不明なデバイス』や『△West bridge』として認識されてしまっている場合にも、上記同様に右クリック→ドライバソフトウェアの更新を選択してください。


4. ドライバの更新を選択いただくと、下記画面となりますので、2つある選択肢の下側『コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します』を選んでください。



5. 下記画面となりますので、再度下側の『コンピュータ上のデバイスドライバの一覧から選択します。』を選択します。




6. 下記画面となりますので、『ディスク使用』を押します。

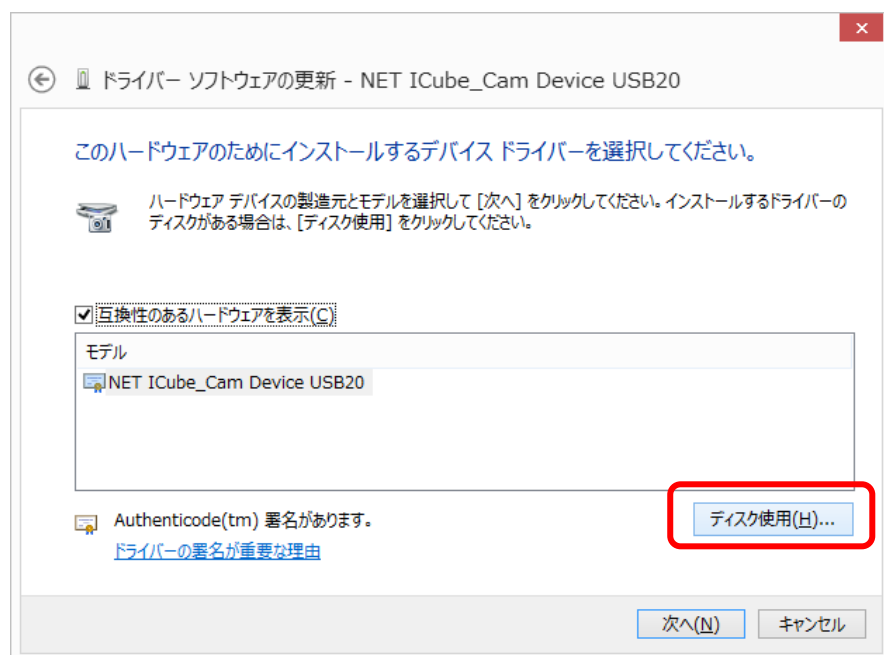


7. 手順 1 にてローカルドライブに置いた『CameraDriver\_2.0.4.6』フォルダ内にある、“**inf**”ファイルを選択し、インストールを続けてください。

※この際、ご使用している PC の OS ビット数が 32 ビットの場合は x32 フォルダ、64 ビットの場合は x64 フォルダ内にある inf ファイルを指定してください。

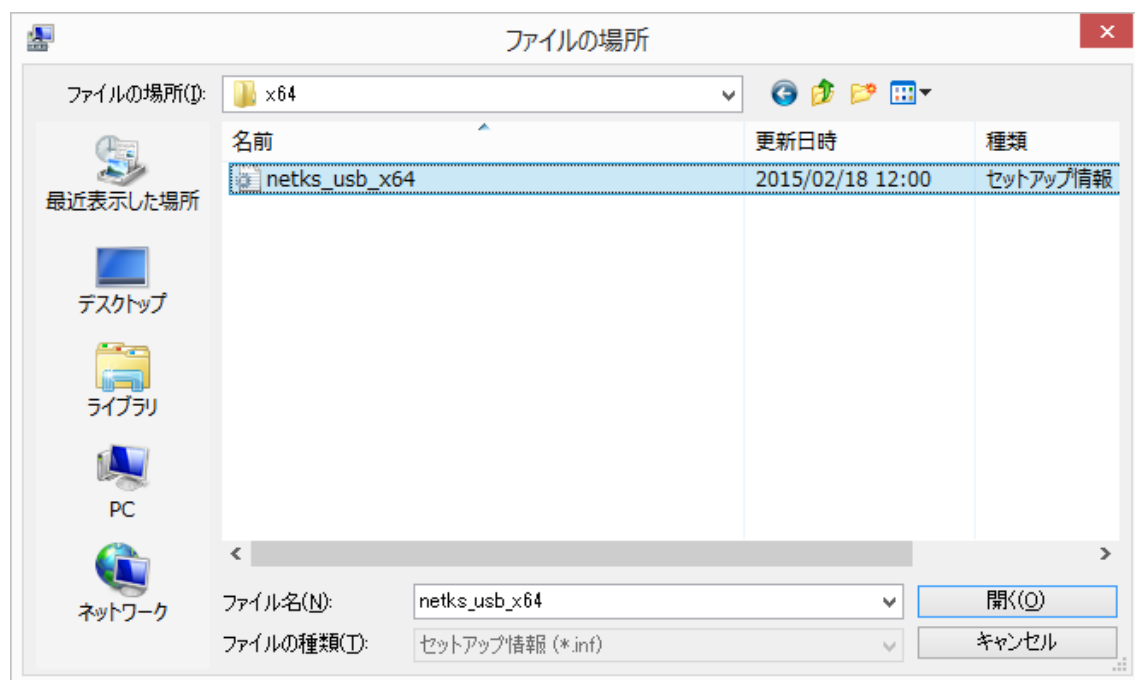

8. デバイスのインストール完了後、デバイスマネージャを開き、接続しているカメラが『イメージングデバイス』として認識されていることを確認後、認識されているカメラ上で右クリック→プロパティを選択し、ドライバータブにてバージョンが更新後のバージョンとなっているかご確認ください。

※下記画像では、2.0.4.6 バージョンがインストールされた後になります。

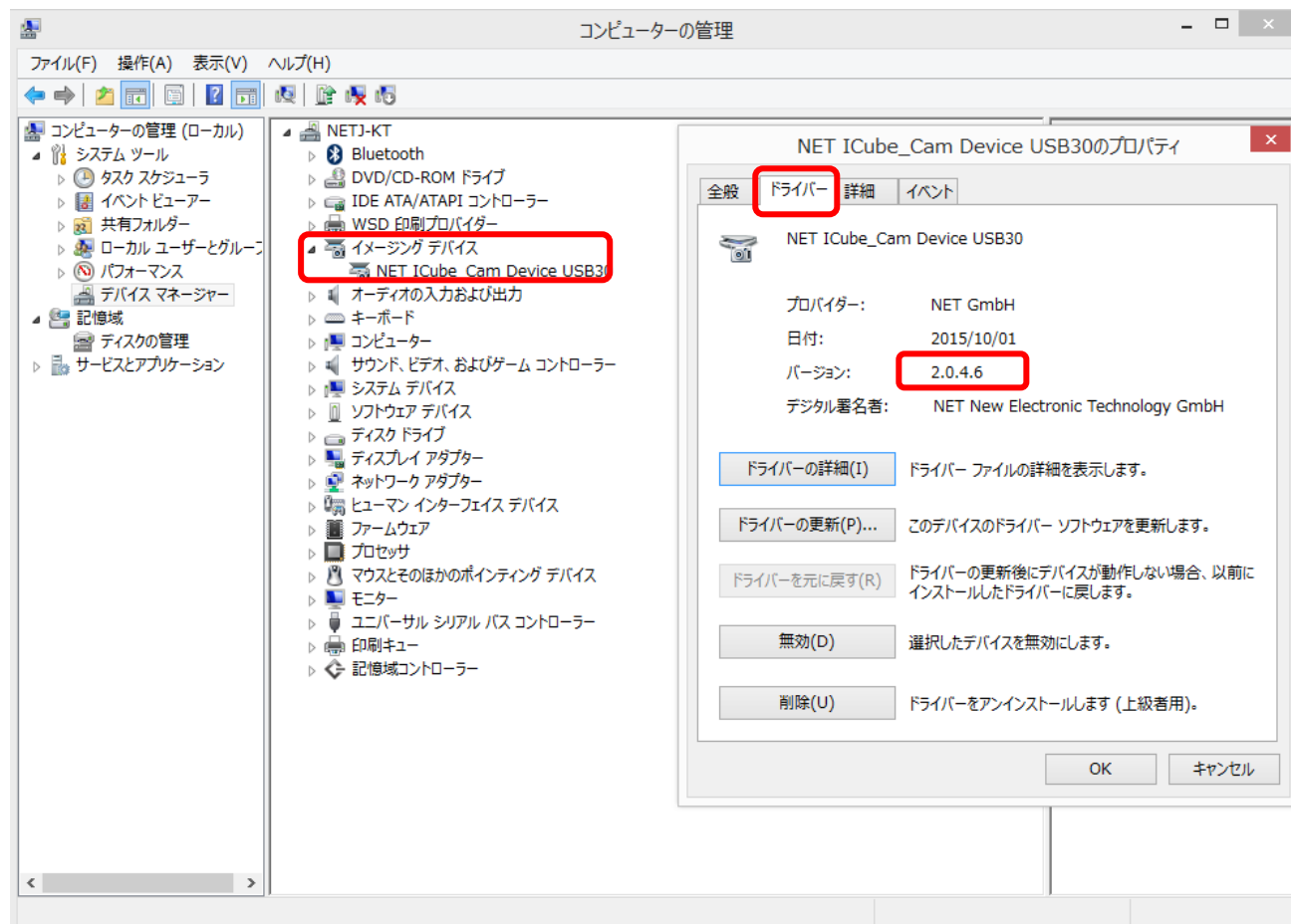

以上